


*A vantagem do tempo.
O poder do controle.
Conquistando a sua confiança.*



Onyx™ LES
Sistema Embólico Líquido

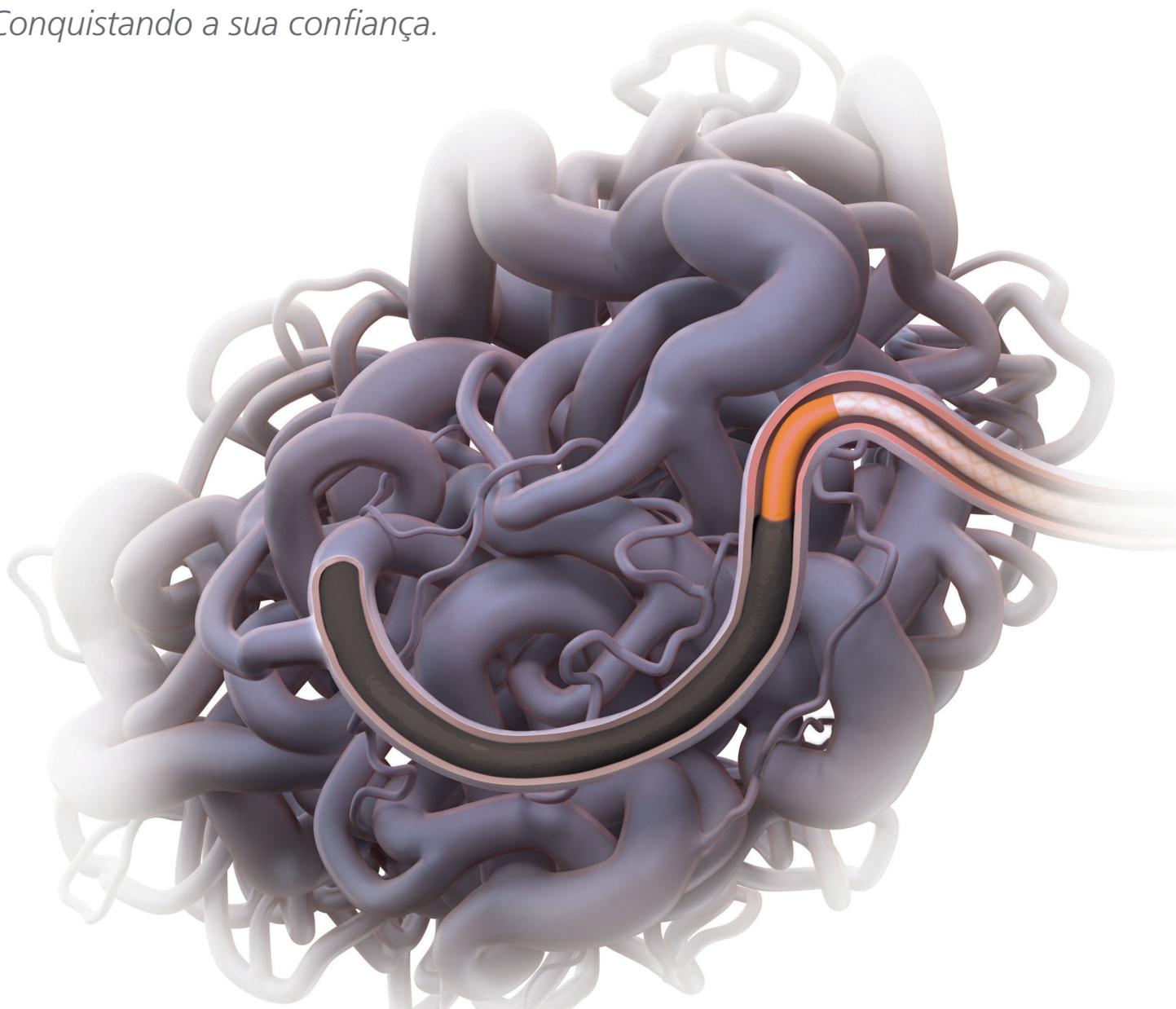

Sistema Embólico Líquido Onyx™

Atingindo um histórico de mais de 200.000 unidades vendidas com um registro de segurança impecável (taxa CER de 0,1% no mundo todo), o Onyx™ LES conquistou a confiança dos médicos. Nosso currículo comprovado em educação profissional forma uma verdadeira parceria no cuidado do paciente. Juntamente com um conjunto completo de produtos de acesso compatíveis, ninguém oferece mais soluções para embolização.

O Sistema Embólico Líquido Onyx™ é um copolímero EVOH projetado para oferecer total penetração e completa oclusão de lesões vasculares.

O agente líquido de embolização Onyx™ permite:

- Uma lenta e controlada injeção e método de fornecimento;
- A capacidade de interromper e iniciar a injeção;
- Deposição e fornecimento coesivo;
- Excelente visibilidade¹;
- Controle da angiografia durante a injeção embólica;
- Excelentes características de manipulação cirúrgica¹.

O Onyx™ LES consiste dos seguintes componentes:

- EVOH (copolímero de etileno e álcool vinílico): o material embólico;
- DMSO (dimetilsulfóxido): o solvente para o fornecimento líquido do EVOH;
- Tântalo micronizado em pó: para visualização radiográfica.

Produtos de Suporte Compatível Onyx™

Kit do Sistema Embólico Líquido Onyx™	Kit Sistema Embólico Líquido Onyx™ 18 Kit Sistema Embólico Líquido Onyx™ 20 Kit Sistema Embólico Líquido Onyx™ 34
Misturador do Sistema Embólico Líquido Onyx™	Misturador do Sistema Embólico Líquido Onyx™
Fio Guia Compatível	Fio Guia Hidrofílico Mirage™ Fio Guia Hidrofílico X-Pedion™ Fio Guia Hidrofílico SilverSpeed™
Microcater Compatível	Microcater c/ Ponta Destacável Apollo™ Microcater Marathon™ Microcater UltraFlow™ Microcater Echelon™ Microcater Rebar™
Balões Neurológicos Compatíveis	Balão de Oclusão HyperGlide™ Balão de Oclusão HyperForm™
Produtos de Suporte Compatíveis	Seringa de Injeção Luer-Lock 1 mL Adaptador da Seringa de Interface do Cateter

Informações para Pedidos

Onyx 18™	105-7000-060
Onyx 20™	105-7000-065
Onyx 34™	105-7000-080

Embalagem:

- Um kit Onyx™ LES contém o seguinte:
- Frasco-ampola de 1,5 mL de Onyx™ 18, 20 ou 34;
 - Frasco-ampola de 1,5 mL de DMSO;
 - Seringas de administração de 1 mL:
 - 2 brancas para Onyx™;
 - 1 amarela para DMSO.



¹ 'Preoperative Embolization of Intracranial Arteriovenous Malformations with Onyx', Neurosurgery Vol. 61; 2: 251 Weber et al. (2007).

Indicações, contraindicações, advertências e instruções para uso podem ser encontradas no rótulo do produto fornecidas em cada dispositivo. COVIDIEN, COVIDIEN com logo, logo da Covidien e *positive results for life* são marcas comerciais registradas nos EUA e internacionalmente da Covidien AG. Outras marcas são marcas comerciais de uma empresa da Covidien. © 2013 Covidien. Reg. M. S.: 80301610012. M.Luz 06/2013.



Tel.: 11 - 2187.6500
0800 17 99 44

suporte@covidien.com
www.covidien.com